


Prueba de detección de cáncer de colon con Cologuard®

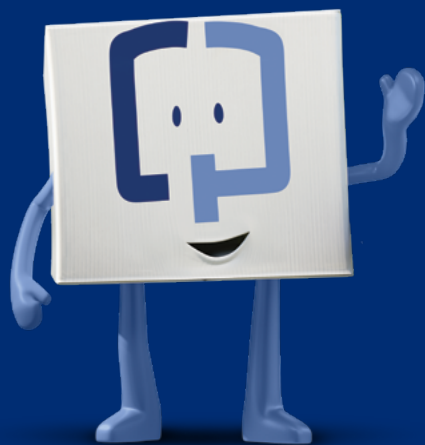

Cómo cuidarse haciendo una prueba de detección de cáncer colorrectal

Suele ser la forma de cáncer que más se puede prevenir, aunque es la que menos se previene.¹

Está aumentando en personas menores de 50 años.²

Cuando se detecta en las etapas iniciales, es más tratable en aproximadamente 90 % de las personas.^{3*}

Por eso, hacer oportunamente las pruebas de detección debe ser parte de sus chequeos médicos.

*Basado en una supervivencia de 5 años.

Cologuard detecta el cáncer de colon incluso en las etapas iniciales^{4,5}

Cologuard es una opción de detección no invasiva que puede hacer en la intimidad de su casa. No hay preparación, ni necesidad de pedir licencias, ni de cambios en la dieta o la medicación.



Cologuard detecta **92 %** de los casos de cáncer en general⁴



Cologuard detecta **94 %** de los casos de cáncer en las etapas I y II⁵

El rendimiento de Cologuard en adultos de entre 45 y 49 años se calcula en función de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de 50 años. En el estudio clínico, 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y 8 % de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo).

Consulte la información importante sobre los riesgos en la parte de atrás.

La mayoría de los pacientes asegurados paga \$0*

Cologuard está cubierto por Medicare y la mayoría de las aseguradoras más importantes

A nivel nacional, más de 94 % de los pacientes que usan Cologuard no tiene que pagar costos de bolsillo por la prueba de detección.*

*Cálculo de Exact Sciences en función de la facturación histórica del paciente al 30 de junio de 2021. La tasa de cobertura varía por estado y región. Se pueden aplicar algunas excepciones; solo su aseguradora puede confirmar en qué casos Cologuard estaría cubierto.

Obtenga más información

sobre los seguros visitando Cologuard.com/insurance

Nuestro equipo de especialistas puede ayudarlo a comunicarse con su aseguradora y a hacer las preguntas adecuadas. Llámenos al **1-844-870-8870**

Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta.

Consulte la información importante sobre los riesgos en la parte de atrás del folleto.





Quite este recordatorio para ayudar a devolver su kit de Cologuard

y póngalo en un lugar donde generalmente deja los recordatorios, como su baño o el refrigerador.



Devuelva su equipo a más tardar el:

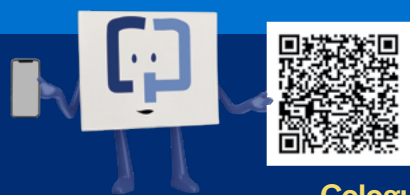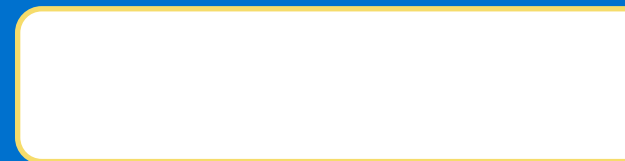

¡Soy fácil de usar!

Cologuard.com/use

Usando la cámara de su teléfono, enfoque el código QR para ver el video de Cómo usar.

¡No olvide devolver su kit de toma de muestra Cologuard!

Cómo usar su kit Cologuard



- 1 Una vez que reciba su kit, desempáquelo y revise la Guía para el paciente adjunta.
- 2 Ponga el recipiente para la muestra en el soporte del inodoro.
- 3 Use su kit Cologuard para tomar su muestra.
- 4 Raspe su muestra y luego agregue el conservante en el recipiente de la muestra. Además, asegúrese de completar ambas etiquetas.
- 5 Usando la etiqueta de prepago de UPS®, envíe la caja de devolución a Exact Sciences Laboratories el mismo día o el día siguiente de la toma de la muestra. Programe una recogida de UPS sin contacto llamándonos al 1-844-870-8870 o visitando Cologuard.com/UPS. Y puede que reciba llamadas de recordatorio útiles para que devuelva su kit.
- 6 El proveedor de atención médica solicitante le dará el resultado unas 2 semanas después de recibirlo en el laboratorio. Puede obtener más información sobre el significado de los resultados visitando Cologuard.com/UnderstandingResults

Soporte disponible 24/7
Llame al **1-844-870-8870** o chatee con nosotros visitando Cologuard.com

¿Qué hay dentro del kit?



Caja de envío



Tubo



Conservante líquido



Recipiente para la muestra



Guía para el paciente



Cómo devolver su kit



Soporte



Etiquetas para la muestra

Indicaciones e información importante sobre riesgos

Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años, con riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo use si tuvo adenomas, tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o historia personal o familiar de cáncer colorrectal. Cologuard no es un reemplazo de la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. El rendimiento de Cologuard en adultos de entre 45 y 49 años se calcula en función de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de 50 años.

Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer. Los pacientes con un resultado positivo en la prueba deben remitirse para que se hagan una colonoscopia de diagnóstico. Un resultado negativo no confirma que no haya cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse la prueba. Pueden ocurrir falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y 8 % de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo). Solo con receta.

REFERENCIAS:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests (Mayores avances en las pruebas de detección de cáncer en heces). *J. Natl. Cancer Inst.* 2009; 101(18):1225-1227. doi:10.1093/jnci/djp273 2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Estadísticas del cáncer colorrectal, 2020. *CA: Cancer J. Clin.* 2020; 70(3): 145-164. doi:10.3322/caac.21601 3. Instituto Nacional del Cáncer. Datos sobre las estadísticas de cáncer: Cáncer colorrectal. Consultado el 16 de julio de 2021. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples para la detección de cáncer colorrectal). *N Engl J Med.* 2014; 370(14):1287-1297. doi:10.1056/NEJMoa1311194 5. Folleto para médicos de Cologuard®. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

EXACT SCIENCES

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2021 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. US.CG.2859-5 de agosto de 2021.