


## Tầm soát ung thư ruột với Cologuard®

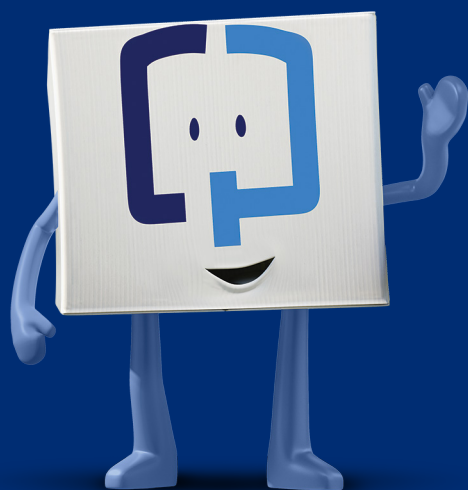

**cologuard®**  
by EXACT SCIENCES

Cologuard có mục đích tầm soát cho người lớn từ 45 tuổi trở lên có mức nguy cơ trung bình về ung thư ruột. Chỉ có Rx.

Vui lòng xem thông tin quan trọng về nguy cơ ung thư ở mặt sau của cuốn sách mỏng.

## Chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách tầm soát bệnh ung thư ruột

Ung thư ruột ảnh hưởng đến mọi người bất kể chủng tộc, giới tính hay dân tộc <sup>1</sup>

**Thứ 3**

Đây là dạng ung thư phổ biến thứ ba ở cả nam và nữ, thường được xem là dạng ung thư dễ ngăn ngừa nhất, nhưng lại ít được ngăn ngừa nhất<sup>2,5</sup>

**45+**

Do ung thư ruột có chiều hướng tăng ở người dưới 50 tuổi, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ nay kiến nghị bắt đầu tầm soát từ độ tuổi 45<sup>3</sup>

**90%**

Hãy ghi nhớ hướng dẫn này. Bởi vì nếu phát hiện ngay từ sớm, bệnh ung thư ruột có thể chữa được ở 90%\* bệnh nhân<sup>4</sup>

Đó là lý do vì sao việc tầm soát kịp thời cần được đưa vào lịch khám sức khỏe định kỳ của bạn!

\*Dựa vào tỷ lệ sống sót sau 5 năm.

## Hiểu đúng về kết quả xét nghiệm của bạn

Nhân viên y tế sẽ trả kết quả xét nghiệm khoảng 2 tuần sau khi mẫu phân được gửi đến phòng thí nghiệm.

Cần nhớ, Cologuard tầm soát **DNA biến tính** và **máu** trong mẫu phân của bạn, do đó kết quả sẽ dựa vào những chỉ thị này<sup>5</sup>

—

Kết quả âm tính có nghĩa là xét nghiệm không phát hiện những dấu hiệu nguy cơ này. Bạn ít có khả năng bị ung thư ruột<sup>5,6</sup>

+

Kết quả dương tính có nghĩa là xét nghiệm phát hiện thấy những dấu hiệu nguy cơ này. Điều quan trọng cần biết là kết quả dương tính **không** giống như kết quả chẩn đoán bệnh ung thư<sup>5</sup>

Kết quả dương tính và âm tính giả có thể xảy ra, vui lòng liên hệ nhân viên y tế để thảo luận các bước tiếp theo<sup>5</sup>


**Cần thêm thông tin? Truy cập [Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults) để biết thêm chi tiết và xem các video của chúng tôi**

## Cologuard là công cụ dễ sử dụng và giá phải chăng

Cologuard nằm trong gói bảo hiểm Medicare và hầu hết các đơn vị bảo hiểm lớn khác. Hầu hết bệnh nhân được bảo hiểm **không trả phí**\*<sup>6</sup>

Trên toàn quốc, có hơn **94%** bệnh nhân Cologuard không phải tự thanh toán chi phí tầm soát ung thư\*<sup>6</sup>

\*Ước tính gần đây của Exact Sciences dựa vào lịch sử thanh toán của bệnh nhân.

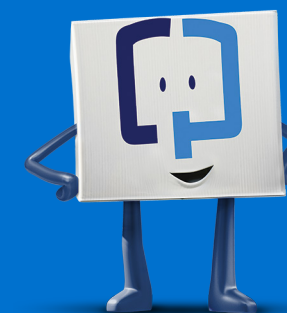

**Tìm hiểu thêm** về chính sách bảo hiểm bằng cách truy cập [Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance)

Chúng tôi có thể giúp bạn liên hệ công ty bảo hiểm để đặt câu hỏi phù hợp. Gọi số **1-844-870-8870**



## Xé nhãn nhắc nhở này để giúp bạn nhớ gửi trả bộ kit Cologuard

và dán ở nơi nào bạn thường lưu giữ ghi chú nhắc nhở - ví dụ như trong phòng tắm hoặc trên cửa tủ lạnh.



Gọi  
1-844-870-8870\*  
hoặc Chat trực tiếp  
tại Cologuard.com

Xem video Cách sử dụng tại Cologuard.com/use

\*Có dịch vụ phiên dịch với +200 ngôn ngữ

Nhớ gửi trả bộ kit trước ngày:



## Cách sử dụng bộ kit Cologuard



Sau khi nhận bộ kit, hãy mở ra và đọc tờ Hướng dẫn dành cho bệnh nhân kèm theo.



Đặt bình chứa mẫu phân vào quai cài toilet



Đi đại tiện vào bình chứa mẫu phân



Vét lấy mẫu phân với ống nạo



Thêm chất bảo quản vào bình chứa mẫu



Nhớ điền thông tin vào cả hai nhãn



Lấy hộp gửi trả mẫu phân về UPS®. Xem trang sau của cuốn sách mỏng này để biết thông tin quan trọng về cách gửi hàng

## Gửi bộ kit Cologuard

Dùng nhãn UPS® **trả trước** để gửi bộ kit về cho Exact Sciences Laboratories vào cùng ngày thu thập mẫu phân hoặc ngày hôm sau

Cần đảm bảo Chủ nhật hoặc ngày lễ không làm trì hoãn việc gửi mẫu xét nghiệm

Có hai cách gửi trả không mất phí để bạn chọn:

### Cách 1:

Hẹn nhân viên UPS đến nhận hàng bằng cách truy cập [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) để lên lịch hoặc gọi **1-844-870-8870** để được trợ giúp

### Cách 2:

Mang bộ kit đến địa điểm UPS. Truy cập [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) để tìm điểm nhận hàng tại địa phương và giờ làm việc

## Các chỉ định và Thông tin quan trọng về nguy cơ

Cologuard là công cụ tầm soát cho người lớn từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ trung bình về ung thư ruột bằng cách phát hiện một số chỉ thị DNA và máu trong phân. Không được sử dụng nếu bạn bị u tuyến, viêm ruột và một số hội chứng di truyền, hoặc bản thân hay gia đình có tiền sử ung thư ruột. Cologuard không thay thế cho thủ thuật nội soi đại tràng cho các bệnh nhân có nguy cơ cao. Hiệu quả hoạt động của Cologuard ở người trong độ tuổi 45-49 được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn gồm các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.

Kết quả xét nghiệm Cologuard cần được diễn giải thận trọng. Một kết quả dương tính không khẳng định sự hiện diện của ung thư. Không nên chuyển bệnh nhân có kết quả dương tính đi làm thủ thuật nội soi. Một kết quả âm tính không khẳng định là không có ung thư. Bệnh nhân có kết quả âm tính nên thảo luận với bác sĩ thời điểm họ cần xét nghiệm lại. Kết quả dương tính giả và âm tính giả có thể xảy ra. Trong một nghiên cứu lâm sàng, có 13% người không bị ung thư nhận kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% người mắc ung thư nhận kết quả âm tính (âm tính giả). Chỉ có Rx.

### Tài liệu tham khảo:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S và cộng sự. Báo cáo thường niên toàn quốc về tình trạng ung thư, phần I: số liệu ung thư quốc gia. *Ung thư*. 2020;126(10):2225-2249. 2. Viện Ung thư Quốc gia. Gen ung thư ruột (PDQ®) - phiên bản dành cho nhân viên y tế. Truy cập ngày 26/09/2022. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq> 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR và cộng sự. Tầm soát ung thư ruột cho người lớn có nguy cơ trung bình: hướng dẫn cập nhật 2018 từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281. 4. Viện Ung thư Quốc gia. Số liệu ung thư: ung thư ruột. Truy cập ngày 26/09/2022. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 5. Exact Sciences. 2022. Brochure Cologuard cho bệnh nhân. 6. Exact Sciences. 2022. Dữ liệu trong file.

EXACT  
SCIENCES

cologuard®  
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION  
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard là nhãn hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation. Mọi nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền.  
M-US-CG-03801