


Dépistage du cancer colorectal avec Cologuard®

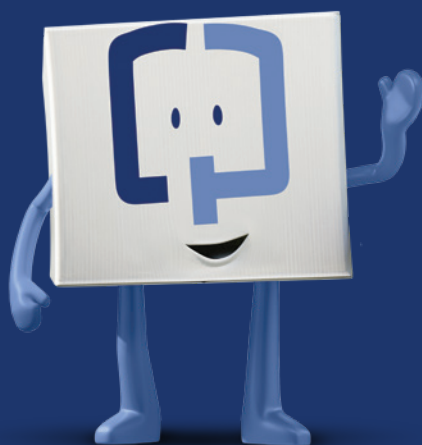

Le Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen. Sur prescription uniquement.

Veuillez consulter les informations importantes concernant les risques au dos de cette brochure.

Prenez soin de vous avec le dépistage du cancer colorectal

Le cancer colorectal est la forme de cancer la plus évitable¹

Les cas sont en augmentation chez les personnes âgées entre 45 et 49 ans²

Détecté à un stade précoce, il est plus facile à traiter dans 90 % des cas^{3*}

C'est la raison pour laquelle un dépistage opportun devrait faire partie de vos bilans de santé réguliers

*Fondé sur une survie de cinq ans.

Le Cologuard détecte le cancer colorectal même à des stades précoces^{4,5}

Le Cologuard est une option de dépistage non invasive. Aucune préparation n'est nécessaire et vous pouvez l'effectuer dans l'intimité de votre domicile.



Globalement, le Cologuard détecte **92 %** des cancers⁴



Le Cologuard détecte **94 %** des cancers aux stades I et II⁵

L'efficacité du Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans se fonde sur une vaste étude clinique menée auprès de patients âgés de 50 ans et plus. Lors de cette étude clinique, 13 % des personnes non atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat négatif (faux négatif).

Veuillez consulter les informations importantes concernant les risques au verso.

Pour la plupart des patients assurés, le coût est de **0 \$***

Le Cologuard est pris en charge par Medicare et la plupart des compagnies d'assurance

À l'échelle nationale, plus de 94 % des patients Cologuard n'ont aucun frais à déboursier pour le dépistage.*

*Estimation d'Exact Sciences fondée sur l'historique de facturation aux patients entre le 1er octobre 2019 et le 31 janvier 2020. Le taux de couverture varie selon l'État et la région. Il peut exister des exceptions à la couverture. Seul votre assureur peut confirmer la façon dont le Cologuard serait couvert dans votre cas.


Vous voulez en savoir plus sur
la couverture d'assurance ? Visitez
[Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)

Découpez ce rappel pour vous aider à ne pas oublier de retourner votre kit Cologuard

et placez-le à un endroit où vous gardez habituellement vos rappels, comme votre salle de bains ou votre réfrigérateur.



Veillez retourner votre kit au plus tard le :

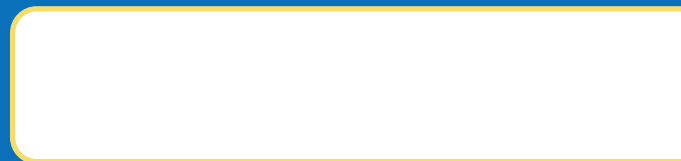

Cologuard.com/use

Je suis facile à utiliser !

Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour regarder la vidéo sur les consignes d'utilisation.

N'oubliez pas de retourner votre kit de prélèvement Cologuard !

Mode d'emploi de votre kit Cologuard



- 1 Une fois que vous avez reçu votre kit, déballez-le et consultez le Guide du patient ci-joint.
- 2 Placez le récipient de prélèvement dans le support pour toilettes.
- 3 Utilisez votre kit Cologuard pour recueillir votre échantillon.
- 4 Frottez votre échantillon, puis remplissez le récipient de prélèvement avec le liquide de conservation. Assurez-vous également de remplir les deux étiquettes.
- 5 Utilisez l'étiquette UPS prépayée pour renvoyer la boîte au laboratoire Exact Sciences dans les 24 heures suivant la collecte. Organisez un ramassage sans contact par UPS en nous appelant au +1 (844) 870-8870, ou visitez le site Cologuard.com/UPS. Vous pourriez recevoir des rappels utiles de notre part vous invitant à renvoyer votre kit.

Assistance disponible 24 h/24, 7 j/7

Appelez-nous au **+1 (844) 870-8870** ou discutez avec nous en visitant le site Cologuard.com

Contenu de votre kit



Boîte d'expédition



Tube de prélèvement



Liquide de conservation



Récipient de prélèvement



Guide du patient



Comment retourner votre kit ?



Support



Étiquettes pour échantillon

Indications et informations importantes sur les risques

Le Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen. Il permet de détecter certains marqueurs d'ADN ainsi que la présence de sang dans les selles. Vous ne devez pas l'utiliser si vous avez déjà eu un adénome, si vous souffrez d'une maladie inflammatoire chronique intestinale, de certaines maladies héréditaires ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal. Le Cologuard ne peut pas remplacer la coloscopie chez les patients à risque élevé. L'efficacité du Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans se fonde sur une vaste étude clinique menée auprès de patients âgés de 50 ans et plus.

Les résultats du test Cologuard doivent être interprétés avec prudence. Un test positif ne confirme pas la présence d'un cancer. Les patients ayant obtenu un résultat positif doivent être orientés vers une coloscopie diagnostique. De même, un test négatif ne confirme pas la présence d'un cancer. Les patients ayant obtenu un résultat négatif doivent consulter leur médecin pour déterminer quand répéter le test. Des faux positifs et des faux négatifs peuvent se produire. Lors d'une étude clinique, 13 % des personnes non atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes atteintes d'un cancer ont obtenu un résultat négatif (faux négatif). Sur prescription uniquement.

RÉFÉRENCES:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. 2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281. 3. National Cancer Institute. SEER cancer stat facts: colorectal cancer. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colrect.html>. Consulté le 4 février 2020. 4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. 5. Ahlquist DA. Multi-target stool DNA test: a new high bar for noninvasive screening. *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

EXACT SCIENCES

cologuard
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | +1 (844) 870-8870

Cologuard est une marque déposée d'Exact Sciences Corporation.
©2020 Exact Sciences Corporation. Tous droits réservés. US.CG.2859-2-July 2020.