


Пройдите скрининг рака толстой кишки с помощью комплекта Cologuard®

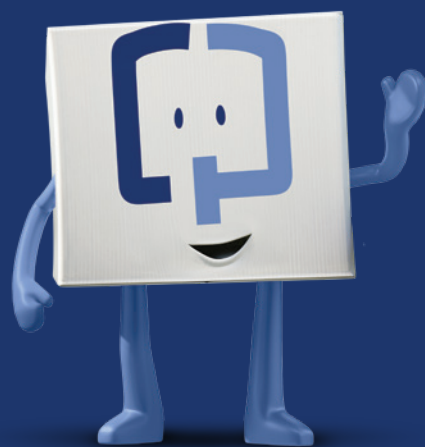

Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет, которые находятся в группе среднего риска развития колоректального рака. Только по предписанию врача.

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на обратной стороне брошюры.

Пройдите скрининг колоректального рака, **позаботьтесь** о себе

Это наиболее предотвратимая форма рака¹

Чаще всего встречается у людей в возрасте 45–49 лет²


При выявлении рака на ранних стадиях вероятность его успешного лечения возрастает в 90 % случаев^{3*}


Вот почему своевременный скрининг должен стать частью ваших регулярных медицинских обследований

*Согласно данным о пятилетней выживаемости после лечения.

Cologuard выявляет рак толстой кишки даже на **ранних** стадиях^{4,5}

Тест Cologuard является неинвазивным методом скрининга. Никакой подготовки не требуется, и вы можете пройти скрининг у себя дома без присутствия посторонних лиц.

 Cologuard выявляет рак в **92 % случаев**⁴

 Cologuard выявляет рак I и II стадии в **94 % случаев**⁵

Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте 45–49 лет оценивается на основе крупного клинического исследования среди пациентов в возрасте от 50 лет. В ходе данного клинического исследования у 13 % людей без рака был зафиксирован положительный результат (ложноположительный), а у 8 % больных раком — отрицательный (ложноотрицательный).

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на обратной стороне.

Для большинства пациентов, имеющих медицинскую страховку, тест **бесплатный***

Стоимость теста Cologuard покрывается страховками Medicare и большинства основных страховщиков

Более 94 % пациентов по всей стране, выполняющих скрининг Cologuard, не доплачивают за него из собственных средств.*

* Оценка лаборатории Exact Sciences, основанная на выставлении счетов пациентам в период с 1 октября 2019 года по 31 января 2020 года. Размер страхового покрытия варьируется в зависимости от штата и региона. Существуют некоторые исключения; только ваша страховая компания может подтвердить условия покрытия стоимости теста Cologuard.

Хотите узнать больше
о страховом покрытии? Посетите
страницу
Cologuard.com/insurance



Оторвите это напоминание

и положите его туда, где вы обычно храните напоминания, например наклейте на зеркало в ванной комнате или на дверцу холодильника — это поможет вам не забыть о необходимости вернуть комплект Cologuard



Верните комплект не позднее:



Cologuard.com/use

Это очень просто!
Отсканируйте QR-код с помощью камеры своего смартфона, чтобы посмотреть видеоруководство по использованию.

Не забудьте вернуть свой комплект для сбора образцов Cologuard!

Как использовать комплект Cologuard



- 1 Как только вы получите свой комплект, распакуйте его и ознакомьтесь с прилагаемым руководством для пациента.
- 2 Разместите контейнер для образца в подставке на унитазе.
- 3 Воспользуйтесь комплектом Cologuard для сбора образца.
- 4 Отберите немного образца, а затем добавьте консервант в контейнер для образца. Также обязательно заполните обе этикетки.
- 5 Отправьте коробку в лабораторию Exact Sciences Laboratories в течение суток с момента сбора образца; используйте предоплаченную этикетку UPS из комплекта. Позвоните по номеру 1-844-870-8870 или посетите страницу Cologuard.com/UPS, чтобы договориться о бесконтактной доставке. Мы можем позвонить вам, чтобы напомнить о необходимости возврата комплекта.

Круглосуточная служба поддержки

Позвоните по номеру **1-844-870-8870** или свяжитесь с нами на сайте Cologuard.com

Что входит в комплект?



Упаковочная коробка



Пробирка



Жидкий консервант



Контейнер для образца



Руководство для пациента



Как вернуть набор



Подставка



Этикетки для образцов

Показания к применению и важная информация о рисках

Комплект Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет, которые находятся в группе среднего риска развития колоректального рака, посредством обнаружения определенных ДНК-маркеров и крови в кале. Не используйте Cologuard, если у вас были аденомы, воспалительные заболевания кишечника и определенные наследственные синдромы, а также при наличии колоректального рака в личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет колоноскопию для пациентов, входящих в группу высокого риска. Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте 45–49 лет оценивается на основе крупного клинического исследования среди пациентов в возрасте 50 лет и старше.

Интерпретировать результаты Cologuard следует с осторожностью. Положительный результат теста не подтверждает наличие рака. В случае положительного результата необходимо проконсультироваться с врачом и пройти диагностическую колоноскопию. Отрицательный результат теста Cologuard не гарантирует отсутствия рака. Пациентам с отрицательным результатом следует обсудить со своим врачом, когда им нужно выполнить повторный тест. Тест может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. В ходе клинического исследования у 13 % людей без рака был зафиксирован положительный результат (ложноположительный), а у 8 % больных раком — отрицательный (ложноотрицательный). Только по предписанию врача.

ССЫЛКИ

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227.
2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281.
3. National Cancer Institute. SEER cancer stat facts: colorectal cancer. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colrect.html>. Дата посещения веб-страницы: 4 февраля 2020 г.
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.
5. Ahlquist DA. Multi-target stool DNA test: a new high bar for noninvasive screening. *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

EXACT SCIENCES

 **cologuard**[®]
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard является зарегистрированной торговой маркой Exact Sciences Corporation.
© Exact Sciences Corporation, 2020. Все права защищены | US.CG.2859-2-July 2020.