


Пройдите скрининг рака толстой кишки с помощью теста Cologuard®

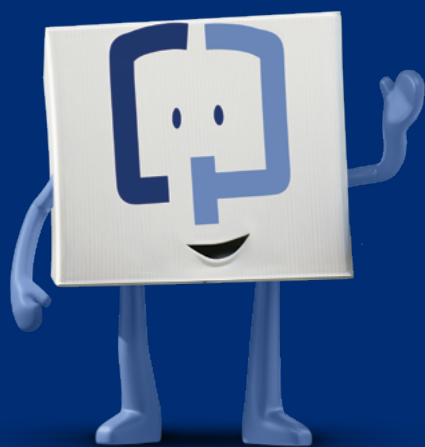

Тест Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет, которые находятся в группе среднего уровня риска развития колоректального рака. Только по предписанию врача.

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на обратной стороне брошюры.

Позаботьтесь о себе — пройдите скрининг колоректального рака

Эта форма рака часто считается наиболее предотвратимой, но в то же время является наименее предотвращаемой¹

Чаще всего встречается у людей в возрасте до 50 лет²

При выявлении на ранних стадиях этот рак успешно лечится в 90 % случаев^{3*}

Вот почему своевременный скрининг должен стать частью ваших регулярных медицинских обследований

*Согласно данным о пятилетней выживаемости после лечения.

Cologuard выявляет рак толстой кишки даже на ранних стадиях^{4,5}

Тест Cologuard является неинвазивным методом скрининга, который можно выполнить дома без посторонних лиц. Вам не нужно готовиться к тесту, брать выходной на работе или вносить изменения в режим питания либо приема медикаментов.



Cologuard выявляет рак в 92 % случаев⁴



Cologuard выявляет рак I и II стадии в 94 % случаев⁵

Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте 45–49 лет оценивается на основе крупного клинического исследования среди пациентов в возрасте 50 лет и старше. В ходе этого клинического исследования у 13 % людей без рака был зафиксирован положительный результат (ложноположительный), а у 8 % больных раком — отрицательный (ложноотрицательный).

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на обратной стороне.

Для большинства пациентов, имеющих медицинскую страховку, тест **бесплатный***

Стоимость теста Cologuard покрывается страховками Medicare и большинства основных страховщиков

Более 94 % пациентов по всей стране, выполняющих скрининг Cologuard, не доплачивают за него из собственных средств.*

* Оценка компании Exact Sciences, основанная на выставлении счетов пациентам за прошедшие периоды по состоянию на 30 июня 2021 года. Размер страхового покрытия варьируется в зависимости от штата и региона. Существуют некоторые исключения; только ваша страховая компания может подтвердить условия покрытия стоимости теста Cologuard.

Подробные сведения о страховании см. на веб-странице Cologuard.com/insurance

Наша команда специалистов может помочь вам связаться с вашей страховой компанией и задать правильные вопросы. Позвоните нам по номеру **1-844-870-8870**




Оторвите это напоминание о необходимости вернуть комплект Cologuard

и положите его туда, где вы обычно храните напоминания, например наклейте на зеркало в ванной комнате или на дверцу холодильника.



Верните комплект не позднее:

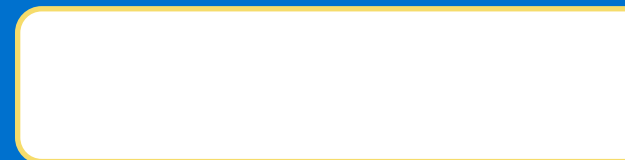


Это очень просто!

Cologuard.com/use

Отсканируйте QR-код с помощью камеры своего смартфона, чтобы посмотреть видеоинструкцию по использованию.

Не забудьте вернуть свой комплект для сбора образцов Cologuard!

Как использовать комплект Cologuard

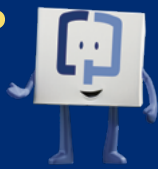

- 1 Как только вы получите свой комплект, распакуйте его и ознакомьтесь с прилагаемым руководством для пациента.
- 2 Разместите контейнер для образца в держателе на унитазе.
- 3 Воспользуйтесь комплектом Cologuard для сбора образца.
- 4 Отберите небольшое количество образца, а затем добавьте консервант в контейнер для образца. Также обязательно заполните обе этикетки.
- 5 Отправьте коробку в лабораторию Exact Sciences Laboratories в день забора образца или на следующий день; используйте предоплаченную этикетку UPS®. Чтобы договориться о бесконтактной доставке, позвоните по номеру 1-844-870-8870 или посетите страницу Cologuard.com/UPS. Мы можем позвонить вам, чтобы напомнить о необходимости возврата комплекта.
- 6 Ваш поставщик медицинских услуг, заказавший анализ, сообщит вам результаты спустя примерно 2 недели после их получения в лаборатории. Чтобы подробнее узнать о том, что означают результаты, посетите веб-страницу Cologuard.com/UnderstandingResults

Круглосуточная служба поддержки

Позвоните по номеру **1-844-870-8870** или свяжитесь с нами на сайте Cologuard.com

Что входит в комплект?



Упаковочная коробка



Пробирка



Жидкий консервант



Контейнер для образца



Руководство для пациента



Инструкция по возврату



Держатель



Этикетки для образцов

Показания к применению и важная информация о рисках

Комплект Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет, которые находятся в группе среднего риска развития колоректального рака, посредством обнаружения определенных ДНК-маркеров и крови в кале. Не используйте Cologuard, если у вас были аденомы, воспалительные заболевания кишечника и определенные наследственные синдромы, а также при наличии колоректального рака в личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет колоноскопию для пациентов, входящих в группу высокого риска. Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте 45–49 лет оценивается на основе крупного клинического исследования среди пациентов в возрасте 50 лет и старше.

Интерпретировать результаты Cologuard следует с осторожностью. Положительный результат теста не подтверждает наличие рака. В случае положительного результата врач направит вас на диагностическую колоноскопию. Отрицательный результат теста Cologuard не гарантирует отсутствия рака. Пациентам с отрицательным результатом следует обсудить со своим врачом, когда им нужно выполнить повторный тест. Тест может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. В ходе клинического исследования у 13 % людей без рака был зафиксирован положительный результат (ложноположительный), а у 8 % больных раком – отрицательный (ложноотрицательный). Только по предписанию врача.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. doi:10.1093/jnci/djp273
2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Colorectal cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin.* 2020;70(3):145-164. doi:10.3322/caac.21601
3. National Cancer Institute. Cancer stat facts: Colorectal cancer. Дата обращения: 16 июля 2021 г. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. doi:10.1056/NEJMoa1311194
5. Cologuard® Physician Brochure. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

EXACT SCIENCES

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard является зарегистрированной торговой маркой Exact Sciences Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.
© Exact Sciences Corporation, 2021. Все права защищены. US.CG.2859-5 August 2021